

Doküman No: IFU-GPNS Documentation No: IFU-GPNS	İlk yayın tarihi: 02/05/2012 Valid from: 02/05/2012	Revizyon no: 01 Revision no: 01	Sayfa:1 Page:1
		Revizyon tarihi: 26.05.2016 Revision date:26.05.2016	

GEOTEK® NEFROSTOMİ SETİ

Kullanma Kılavuzu

TR

Her set; Tamamen radyoopak Pigtail veya Malekot tipte nefrostomi kateteri ile 4 farklı çapta dilatör, PTFE kaplı J uçlu sert kılavuz tel, 18G girişim iğnesi, kateter fiksasyon diski, idrar torbası konnektörü ve bistüri içerir. Kateter yumuşak PU dan yapılmıştır,

Endikasyonlar: Renal tümörler, veya inflamasyonel hastalıkların sebep olduğu üst üreter &renal tıkanıklıklarda geçici eksternal drenaj

Kontraindikasyonlar: Ciddi enfeksiyonlar, kanama, inkontinans

Yan Etkiler: Yabancı maddenin sebep olduğu böbrek / üreter iritasyonu, ağrı, artan miksiyon sıklığı, dizüri, hematurü.

Uyarılar: Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Nefrostomi kateterizasyonunun doğru işlemini sağlamak amacı ile kateterin lokasyonu ve idrar miktarı ile hematuri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojektir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C desaklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız.

Nefrostomi Kateter Yerleştirme:

Standart Seldinger tekniği uygulanır:

- Girişim iğnesini x-ray kontrolü altında renal pelvise ilerletin
- Kılavuz teli girişim iğnesi içerisinden renal pelvis bölgesine kadar yerleştirin.
- En inceden başlayarak dilatörleri sıra ile kılavuz tel üzerinden geçirerek, dilatasyon işlemini tamamlayın
- Kateteri Kılavuz tel üzerinden ilerleterek pigtail / malekot bölgesi ve drenaj deliklerinin tamamı renal pelvis bölgesinde olacak şekilde yerleştirin
- Kateter doğru pozisyona yerleştğinde,kateteri sabit tutarak kılavuz teli geri çekerek çıkartın
- Kateterin dışarda kalan kısmını fiksasyon diski ile cilde sabitleyin.
- Sette bulunan konnektörünü kullanarak, kateteri idrar torbasına bağlayın

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.



1984 : CE mark and NB identification number

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12
YENİMAHALLE -ANKARA
TEL:+90312 3959852
FAX:+90312 3959853

GEOTEK® NEPHROSTOMY SET

Instruction for Use

ENG

Nephrostomy set includes;Pigtail/Malekot type drainage catheter and 4 different sizes of dilators, PTFE coated J tip stiff guide wire, 18G Access Needle, Catheter fixation disk, bag connector and scalpel. Nephrostomy catheter made by soft PU.

Indications: Temporary External Drainage of renal collection sistem obstructed by inflammation, renal tumors..etc

Contraindications: Serious infections, hematuria, incontinence

Side Effects: Kidney, upper bladder irritation caused by foreignbody, pain, infection, increased miction-frequency, hematuria

Cautions: This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Regular monitoring of location and free passage of catheter is necessary to evaluate nephrostomy efficiency.


Ethylene oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light.. Possible allergic reactions should be considered. For single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use.

Placement of Nephrostomy Catheter:

Standard Seldinger technique:

- Insert the Access needle under x-ray guidance in to renal pelvis
- Load the guide wire in to Access needle and push it to the renal pelvis
- Insert dilators in order, over the guide wire and complete dilatation
- Insert the Nephrostomy catheter over guide wire and advance it to renal pelvis area. Please keep guide wire tight during this process.
- When the catheter placement is complete, withdraw the guide wire gently while holding the catheter at right position.
- Fix the catheter to skin with fixation disk.
- Connect the catheter with urine bag with bag connector.

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.

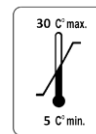

STERILE EO

Single Use Storage limits Expiry Date Ethylene oxide sterilized